


Manometria de Alta Resolução

Esofágica e Anorectal

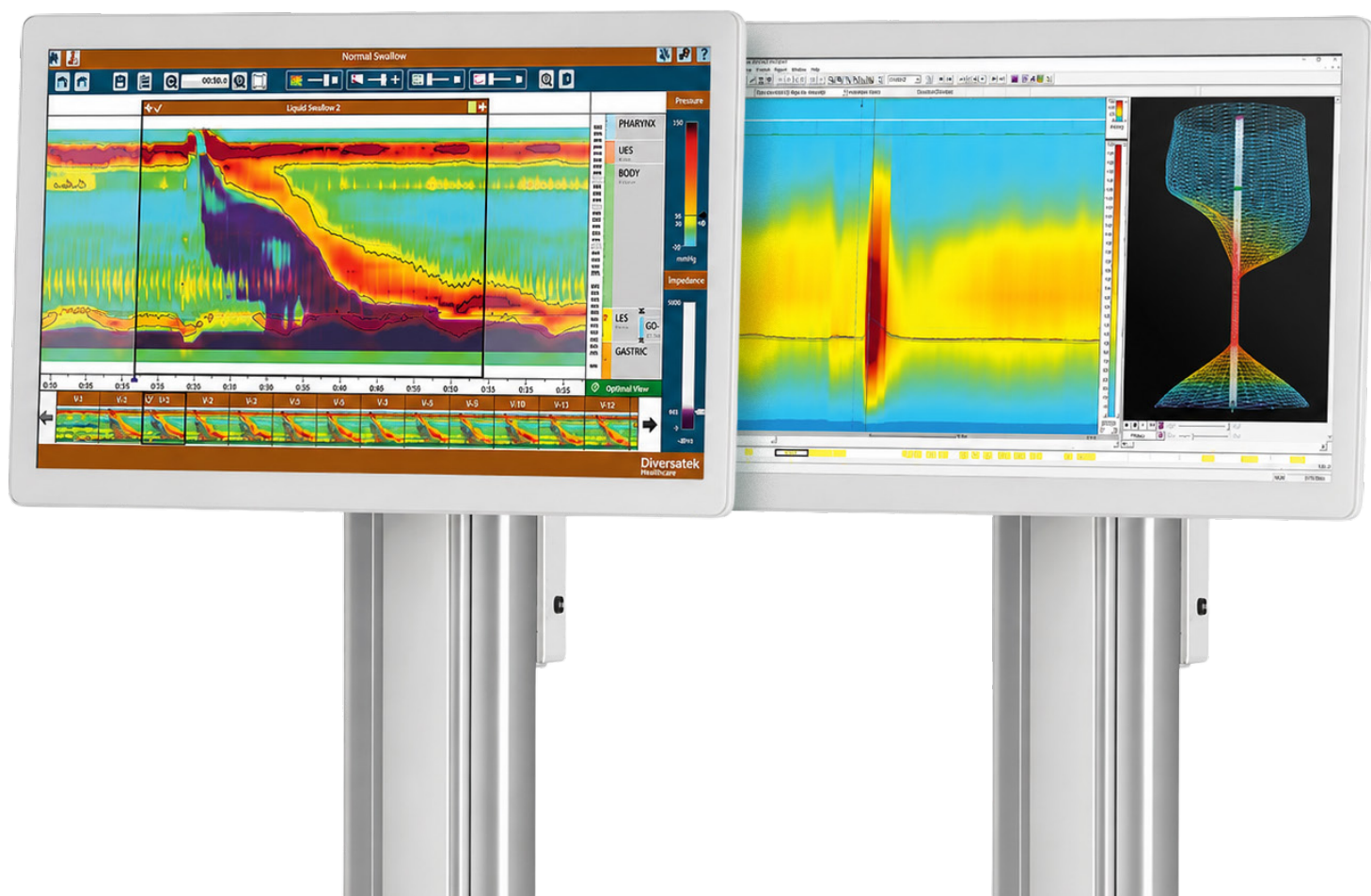

Manometria Esofágica de Alta Resolução

Uma combinação que gera um resultado mais completo, com maior precisão diagnóstica e suporte à tomada de decisão clínica.


Sonda Zvu® HRiM

Desenvolvida para desempenho e conforto do paciente.

Cobertura completa do esôfago com 34 sensores de pressão e 18 canais de impedância

Ponta atraumática e flexível para uma introdução mais confortável

A sonda possui 136 sensores de pressão, com redundância na detecção de pressão e compensação avançada de temperatura, garantindo desempenho contínuo mesmo em caso de falha de um dos sensores.

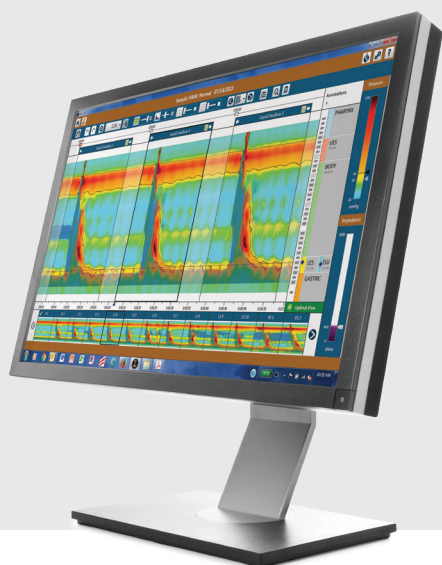

Software Zvu®

O software Zvu®, com a Classificação de Chicago v4.0, incorpora novos protocolos de deglutição e métricas avançadas, como IBP, EGJ-CI e DCI inibitório, contribuindo para maior precisão e confiança diagnóstica.

Entre os principais recursos do Zvu® estão:

Barra de miniaturas de deglutições de fácil acesso

Ícones intuitivos para personalização das visualizações

Métricas em tempo real e Relatórios personalizáveis



Kit do sistema PriZm®

Composto pelos seguintes componentes:

- Unidade Central PriZm®
- Tela sensível ao toque LCD de 24", de grau médico
- Teclado e mouse
- Computador
- Impressora
- Carrinho ergonômico
- Software Zvu® Functional GI*

*O Zvu® é utilizado para manometria esofágica, teste de integridade da mucosa e monitoramento de refluxo.



Kit Sonda Zvu® HRiM

O kit é composto pelos seguintes itens:

- Uma sonda (12 Fr) com 34 sensores de pressão circunferenciais e 18 canais de impedância
- Um cabo para conexão ao carrinho do sistema



Acessórios para Manometria Esofágica

- Kit de Tubos para Calibração com Ar
- Kit de Tubos para Calibração com Água
- Linhas de Ar para Calibração Automática
- Cabo para Sondas
- Transformador de Isolamento

Manometria Anorretal de Alta Resolução

Precisão Diagnóstica em Tempo Real

Realize exames alinhados à **Classificação de Londres**, obtendo informações objetivas para a avaliação dos distúrbios da motilidade anorretal e suporte às decisões terapêuticas.



Sonda Zvu® HRaM

Desenvolvida para oferecer desempenho superior e maior confiabilidade na avaliação funcional anorretal.

Design durável que permite uma inserção mais fácil e um desempenho confiável

Múltiplos sensores posicionados nos quadrantes posterior, esquerdo, anterior e direito capturam dados circunferenciais

26 canais unidirecionais que fornecem medições detalhadas ao longo de toda a extensão do canal anal e do reto

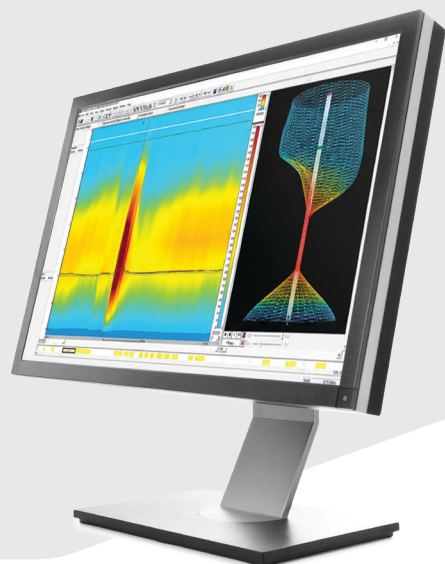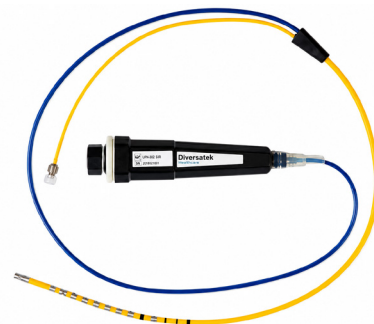

Software BioView®

Protocolos de aquisição guiada e mapeamento de pressão por cores, que simplificam a complexidade da análise dos dados e da interpretação do exame. O SyncVIEW™ fornece uma visualização multidimensional de cada manobra em tempo real.

As principais métricas incluem:

Tosse

Pressões durante esforço de evacuação e contração

Complacência retal

Reflexo inibitório retoanal (RAIR)

Pressão de repouso


Composição dos Kits

Manometria Anorectal



Kit do sistema PriZm®

- Unidade Central PriZm®
- Tela sensível ao toque LCD de 24", de grau médico
- Teclado e mouse
- Computador
- Impressora
- Carrinho ergonômico

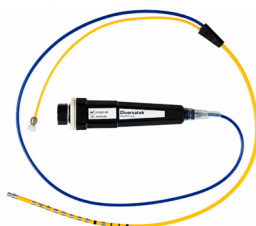

Kit Sonda Zvu® HRaM

- Uma única sonda com 26 canais de pressão unidirecionais e um canal de balão unidirecional
- Cabos
- Ligador Zvu®
- Kit de procedimento com balão anorretal



Kit Inicial para Manometria Anorretal

- Kits de calibração ar e água
- Tubulação de conexão
- Software BioView®: para realizar avaliações do assoalho pélvico
- Software Zvu® GI Funcional: para realizar manometria esofágica, testes de refluxo e testes de integridade da mucosa

Acessórios para Avaliação Funcional

Essa combinação permite correlacionar o mapeamento preciso das pressões com a coordenação neuromuscular e o desempenho da evacuação em condições reais.



Manometria de Alta Resolução em Estado Sólido

Referência	Descrição	Composição	Quantidade
PRIZMCART-II	Carrinho de instalação contendo computador, monitor, teclado/mouse e CPU contendo software	Carrinho feito de metal (alumínio) e plástico de alta densidade, composto por: 01 monitor de computador; 01 CPU com software; 01 teclado; 01 mouse; 01 impressora; 01 Prizm Gen-II; 01 H20-4000; 01 cabo USB.	01 unid.
HRIM-201-12-KIT	Conjunto de manometria esofágica	Conjunto contendo: HRIM-201 – Sonda de manometria esofágica; H12R-7610.	01 unid. de cada referência
HRIM-201	Sonda HRIM para manometria esofágica	Cateter em poliuretano Sensores em aço inox Conectores do cabo em ABS.	01 unid.
MANO-KIT	Conjunto de tubos de pressão de ar e água e mangueira	Contém: H12R-5100; H12R-5200; H12R-5400 Tubos em policarbonato com tampa em ABS Mangueira em PVC.	01 unid.
HRAM-200-17-KIT	Conjunto de sondas para manometria anorretal	Conjunto com: HRAM-20 HRAM-LIGATOR H12R-7610 HRAM-PROC-10 Maleta.	01 unid. de cada item
HRAM-200	Sonda de manometria anorretal	Cateteres em poliuretano Sensores em aço inox Conectores do cabo em ABS.	01 unid.
HRAM-PROC-10	Guia de remoção de balão anorretal com escalpe	Base guia em plástico ABS Escalpe em aço inox 304 Bandas HRAM-LIGATOR em silicone.	01 unid. de cada item
HRAM-BAL-10	Conjunto de 10 balões para manometria anorretal e bandas de fixação	Balão de 400 mL em copolímero de estireno – SEBS.	01 conjunto com 10 unid.

Suporte Clínico Personalizado para os clientes que possuem o equipamento

Treinamento Presencial: Os Especialistas da GFE oferecem suporte aos produtos de acordo com as suas necessidades específicas e na sua programação.

Podemos agendar visitas presencialmente em sua instituição para treinar e apoiar sua equipe no uso dos equipamentos durante o atendimento a pacientes, aquisição de dados, análise de exames e elaboração de laudos.

Treinamento Virtual (Virtual Training): Também oferecemos treinamento virtual personalizado sobre o uso dos equipamentos, adaptado às necessidades do seu departamento e da sua equipe.

Suporte Clínico Virtual (Virtual Clinical Support): De forma online ou presencial, temos o suporte especializado por meio do compartilhamento de tela para reforçar o treinamento clínico, apoiar técnicas e habilidades de edição de exames e auxiliar na análise de estudos complexos.



a Division of

Diversatek
Healthcare

Escaneie o QR Code
e acesse o conteúdo completo

